


Fiche Technique

Kit hyperhydrose - Ref: 4124

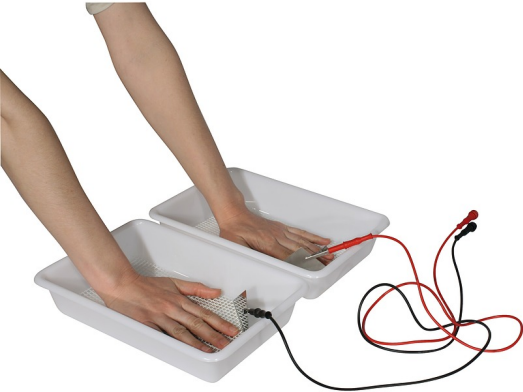

Description du produit

Kit hyperhydrose L'hyperhydrose est traitée efficacement grâce à l'appareil Ionomat, la meilleure solution du marché en termes de gestion de douleur et d'efficacité. Le risque de se tromper dans l'utilisation de l'appareil est nul car la machine marche toute seule grâce au courant pulsé ou courant continu. Caractéristiques Un flux de courant électrique de 10 à 20 mA est transmis sur la surface de la peau, en général le courant passe à travers les pieds ou les mains sur lesquels sont posées des électrodes Transpiration des aisselles Transpiration des pieds Transpiration des mains Mode d'emploi Il s'agit de plonger les zones infectées dans des bacs d'eau (mains, pieds, ou éponges branchées à des électrodes sous les bras).Grâce à ce courant électrique libéré grâce à l'appareil, la peau du patient s'épaissira de façon microscopique et bloquera la fabrication de transpiration des mains, des pieds et/ou des aisselles. Livré avec deux bacs et deux grilles en plastiques, sans câble.

Caractéristiques

Marque	AED
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical

Fiche Technique

Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)

NON