


THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000 (AVEC EMBASE COURTE)

Réf. DWPRO6K01

WelchAllyn®



CE
0297

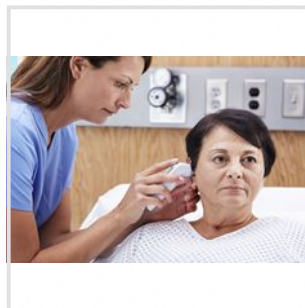

THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000 (AVEC EMBASE COURTE)



Réf. DWPRO6K01

2 secondes pour une prise de mesure précise et fiable : idéal pour les Professionnels de Santé

Le thermomètre tympanique Braun ThermoScan PRO 6000 de Welch Allyn, doté de la technologie de mesure la plus avancée, offre la rapidité et la simplicité dont les professionnels de santé ont besoin pour capturer des relevés de température précis, fiables et de manière confortable pour les patients.

- Durée de mesure : 2 - 3 secondes
- La technologie innovante PerfecTemp™ améliore la précision des mesures en détectant l'orientation et la profondeur d'insertion de la sonde dans le conduit auditif et ajuste les paramètres de calcul de la température.
- La technologie ExacTemp™ contribue à l'exactitude de la mesure en détectant la stabilité de la sonde pendant la mesure
- Il dispose d'un compteur de pouls de 60 secondes facilitant la mesure manuelle de la fréquence de pouls et de la respiration, d'un chronomètre, de boutons de rappel de la dernière mesure et de changement de graduation C/F
- Type d'affichage : Large écran à cristaux liquides rétroéclairé, quatre chiffres plus des icônes spécifiques
- Mise en veille automatique : Environ 10 secondes après la dernière mesure
- Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (alcalines)
- Les couvre-sondes pour ThermoScan® Pro 6000 protègent la sonde et contribuent à minimiser le risque de contamination croisée.
- Petit : 152 mm x 44 mm x 33 mm (6" x 1,7" x 1,3") et léger : 100 grammes (sans pile).
- Durée de vie des piles : 1000 mesures (piles alcalines AA)
- Livré avec : Une embase courte avec un jeu de piles et une boîte de 20 couvre-sondes

Caractéristiques :

- Plage de température affichée : 20,0 °C à 42,2 °C (68 °F à 108 °F)
- Température de fonctionnement : 10,0 °C à 40,0 °C (50 °F à 104 °F)
- Précision : ±0,2 °C (±0,4 °F) pour la plage 35,0 à 42,0 °C (95 à 107,6 °F)

Existe également avec une station de chargement avec batterie rechargeable : à acheter simultanément (DWPRO6K08) ou séparément (DWPRO6K07)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0297

Code barres : 00732094309003

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 902519

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,3

Largeur conditionnement (cm) : 16,0

Longueur unitaire (cm) : 4,4

Longueur conditionnement (cm) : 25,0

Hauteur unitaire (cm) : 15,2

Hauteur conditionnement (cm) : 6,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,500

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -25

Température maxi : 55

Humidité mini : 15

Humidité maxi : 95



02/08/2021 10:09

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.