

Appareil de pressothérapie PRESS 4 Winelec + 2 bottes

La pressothérapie portable pour une utilisation à domicile



Complet, grâce à ses accessoires de série (bottes, manchon, ceinture), très simple d'utilisation et d'un excellent rapport qualité prix, le PRESS 4 remporte un franc succès auprès de ses utilisateurs. Indiqué pour les jambes lourdes et douloureuses ou sujettes à la rétention d'eau, favorise la relaxation et la détente.

Indications :

Effets physiologiques de la pressothérapie

- Augmentation du flux veineux et du flux lymphatique
 - Accélération de la résorption des liquides,
 - Diminue la sensation de jambes lourdes,
 - Elimination des déchets et des toxines,
 - Diminue les œdèmes,
 - Diminue la fatigue des jambes,
 - Facilite la pénétration des principes actifs,
 - Effet relaxant.
- Jambes lourdes et volumineuses (rétention d'eau),
 - Sensibilité des zones grasses,
 - Cliente nerveuse, stressée,
 - Gêne post opératoire en accord avec le chirurgien,
 - Léger problèmes circulatoires.


Contre indications :

Effets esthétiques de la pressothérapie

- Affinement de la silhouette,
 - Atténue l'aspect « marbré »,
 - Raffermissement des tissus endommagés.
- Maladies variqueuses, artériopathies évoluées,
 - Hypertension,
 - Tumeurs, cancers, etc.,
 - Infections locales, dermatoses,
 - Problèmes cardiaques,
 - Phlébites,
 - Toute autre contre indication d'ordre médical.
 - Les patients souffrant d'un de ces troubles demanderont l'avis de leur médecin traitant.

Caractéristiques techniques :

- 4 chambres de compression
- Mode de compression séquentiel
- Temps de cycle réglable de 5 à 30 minutes
- Temps de décompression fixe : 2 minutes
- Pression : Min 20mmHg ~ Max 200mmHg
- Poignée de transport
- Botte ajustable en fonction de la taille de la jambe
- Longueur de la botte : 95 cm, circonférence en haut de la cuisse : 85 cm, genoux 55 cm.
- Poids : 3.5 kg
- Garantie 1 an / accessoires garantis 3 mois

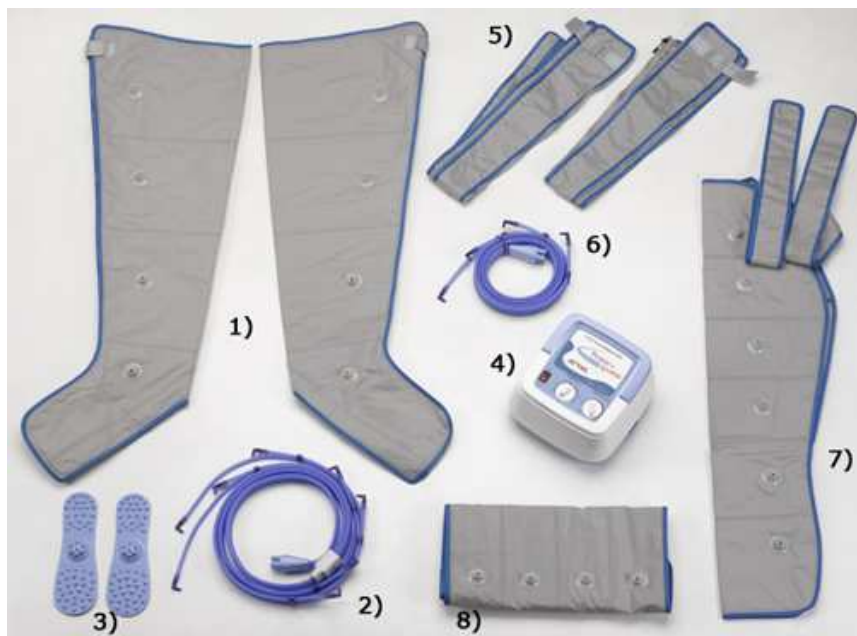

1) 2 Bottes 2) Tubulures bottes 3) Semelles de massage(Option) 4) Unité centrale 5) Extensions bottes 6) Tubulure ceinture et manchon (Option) 7) Manchon (Option) 8) Ceinture (Option)



Livré avec deux bottes de pressothérapie, deux extensions de bottes, un tubulaire, l'appareil et un mode d'emploi.