

PLAIE®

- Stérile
- Adhésif

Toute la gamme :



Certifications et normes :


- Fabriqué et distribué sous un système de management de la qualité certifié ISO 13485 :2016.
- Conforme à la norme NF EN 13726

Stockage :

- A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Durée de la validité du produit : 5 ans

Langues présentes sur les packagings :

Français Italien
Anglais Finnois
Allemand Néerlandais
Portugais Grec
Espagne Bulgare

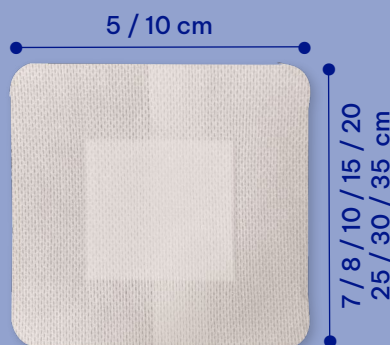

Descriptif et avantages

- Dispositif médical de classe Is (stérilisé à l'oxyde d'éthylène)
- Usage Unique

Pansement adhésif stérile non adhérent à la plaie, pour les plaies post-opératoires. Ce pansement est indiqué pour la protection des plaies avec ou sans exsudats, l'absorption du sang ou des exsudats de la plaie. Il peut être utilisé sur des coupures, écorchures, plaies exsudatives superficielles chirurgicales ou suturées. Peut être utilisé sans risque d'irritation sur peaux fragiles. Facile à décoller. Ne laisse pas de trace sur la peau. Fermé sur les 4 côtés.



RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	VENTE	CONDITIONNEMENT		
			SACHET	BOITE	CARTON
135261ZDM	5 x 7 cm	Carton	1 pansement	100 sachets	10 boîtes
135262ZDM	10 x 8 cm	Carton	1 pansement	50 sachets	10 boîtes
135263ZDM	10 x 10 cm	Carton	1 pansement	50 sachets	10 boîtes
135264ZDM	10 x 15 cm	Carton	1 pansement	50 sachets	10 boîtes
135265ZDM	10 x 20 cm	Carton	1 pansement	50 sachets	10 boîtes
135266ZDM	10 x 30 cm	Carton	1 pansement	50 sachets	10 boîtes
135267ZDM	10 x 25 cm	Carton	1 pansement	50 sachets	10 boîtes
135269ZDM	10 x 35 cm	Carton	1 pansement	50 sachets	10 boîtes
135285ZDM	5 x 7 cm	Boîte	1 pansement	5 sachets	40 boîtes
135286ZDM	10 x 8 cm	Boîte	1 pansement	5 sachets	40 boîtes
135287ZDM	10 x 15 cm	Boîte	1 pansement	5 sachets	20 boîtes
135288ZDM	10 x 20 cm	Boîte	1 pansement	5 sachets	20 boîtes

Le pansement est composé

- d'un support en non tissé adhésif, microporeux multi-extensible, aéré, souple. Adhésif sur les quatre côtés et hypoallergénique.
- au centre une compresse en non tissé recouverte d'un film de PE empêchant l'adhérence de la compresse à la plaie

Précautions d'emploi

- Le pansement ne doit être utilisé qu'une seule fois, une fois l'emballage ouvert.
- Avant d'utiliser le pansement, les mains doivent être lavées et/ou désinfectées.
- Remplacer le pansement au moins une fois par jour
- Le choix du pansement (taille et type) doit se faire en fonction de la plaie à couvrir. Lors de sa mise en place, s'assurer que la partie « compresse » couvre bien la plaie et que la partie adhésive ne touche que la peau saine.
- Bien respecter le temps de séchage des produits de nettoyage et de désinfection

- Afin de maintenir la stérilité et les conditions d'asepsie, il ne faut pas toucher la compresse.
- Lorsque la compresse est souillée, que le pansement se décolle, le pansement doit être changé tout en respectant les règles d'hygiène (lavage des mains, nettoyage de la plaie...).

Ne pas utiliser :

- Plus de 24h
- Si allergie à un des composants du pansement
- Si la barrière stérile a été compromise